


## ▶ PPS® QUICK

Aiguille de Huber sécurisée  
**Protection complète  
de l'Infirmière et du Patient**

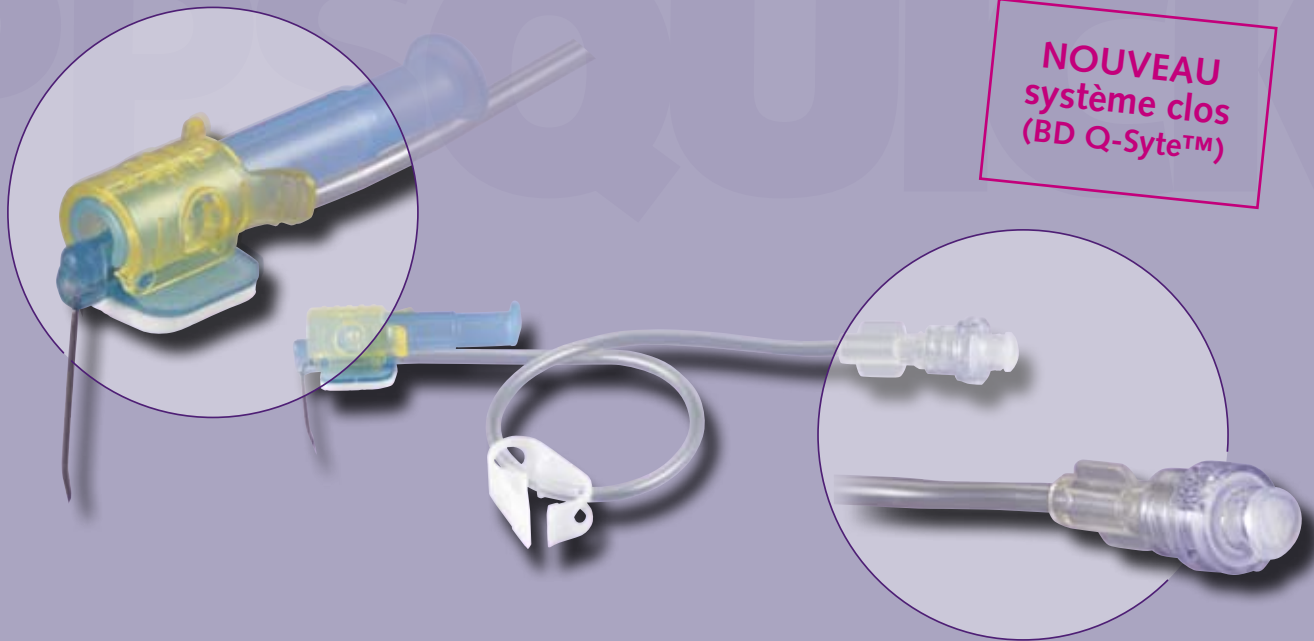

### ● INFIRMIÈRE

- Prévention des AES<sup>(1)</sup>
- Manipulation facilitée

### ● PATIENT

- Prévention des infections associées aux soins (IAS) : SYSTÈME CLOS BD Q-Syte™ pré-scélé sur la ligne principale
- Prévention des obstructions de cathéter : pression positive<sup>(2)</sup> lors du retrait

▶ **Simplicité et respect des bonnes pratiques**

(1) Accidents d'Exposition au Sang  
(2) Selon les recommandations HAS, Décembre 2000

▶ PPS® QUICK

INFIRMIÈRE

○ PRÉVENTION DES AES

- ▶ Sécurité à 100% (pointe et corps de l'aiguille)



○ MANIPULATION FACILITÉE

- ▶ Système clos (BD Q-Syte™) pré-scélé sur la ligne principale

○ RESPECT DES RECOMMANDATIONS HAS 2000

PATIENT

○ PRÉVENTION DES OBSTRUCTIONS DE CATHÉTER

- ▶ Taux d'obstruction de cathéter sur chambre à cathéter implantable : **28 %** <sup>(1)</sup>
- ▶ Pression positive au retrait de l'aiguille : absence de reflux dans la majorité des cas <sup>(2)</sup>



○ PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)


- ▶ Système clos BD Q-Syte™ : maintien d'un environnement stérile dans l'ensemble de la ligne de perfusion <sup>(3)</sup>

Références avec BD Q-Syte™ sur la ligne principale (sans site Y)	Référence avec BD Q-Syte™ sur le raccord en « Y »	Gauge	Ø de l'aiguille (mm)	Longueur utile de l'aiguille (mm)
621507*	-	22G	0,7	15
621707	-	22G	0,7	17
622007	632007	22G	0,7	20
622507	632507	22G	0,7	25
623007	-	22G	0,7	30
623507	-	22G	0,7	35
621709	-	20G	0,9	17
622009	632009	20G	0,9	20
622509	632509	20G	0,9	25
623009	-	20G	0,9	30
623509	-	20G	0,9	35
621711	-	19G	1,1	17
622011	632011	19G	1,1	20
622511	632511	19G	1,1	25
623011	-	19G	1,1	30
623511	-	19G	1,1	35



▶ BD Q-Syte™ scellé sur la ligne principale

- Septum pré-fendu incurvé facile à désinfecter
- Corps transparent (contrôle du rinçage)
- Adaptée aux débits élevés : **525 mL/min**
- Réduction du risque d'embolie gazeuse (fermeture automatique après retrait)

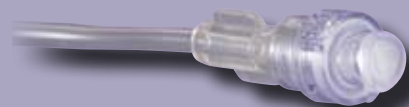

Les aiguilles de Huber PPS® Quick sont conditionnées en boîte de 12 unités. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. **DEHP free**

\*réservé à l'usage pédiatrique.

(1) Carlo JT et al., *The American Journal of Surgery* 188;722-727, 2004  
 (2) Lapalu J et al., *Journal of Vascular access*, in press  
 (3) Jarvis W et al., *American Journal of Infection Control*, Vol 33, Num 5, June 2005